



# Getinge CM 320シリーズ

マルチチャンバーウォッシャーディスインフェクター

# 衛生管理を さらに上のレベルへ

Getinge CM 320シリーズは、コンパクトな設計でありながら、高性能なマルチチャンバー式ウォッシャーディスインフェクターです。モジュール設計と多様な付属品によって、多くのお客様の

ニーズにお応えします。Getinge CM 320のユニークな機能と洗浄能力により衛生管理を再定義しました。

## 衛生面

Getinge CM 320のユニークな機能は、衛生面での厳しい要求にも対応しています。

- 各工程での清潔な給水
- なめらかで高品質なステンレススチールチャンバー
- 清掃が簡単なローラーによる駆動システム
- 完全自然排水の配管システム

## 国際基準に準拠

Getinge CM320は、EN ISO 15883-1のような国際規格を満たし、公認の衛生機関によって検証され、認証を受けています。

温風の循環によるデュアルアクション乾燥システムにより、乾燥速度をさらに向上させました。

## メンテナンス性

ガラスドアより運転中も目視確認が行えます。エア注入式ドアシール構造は過酷な使用に耐え、チャンバーの密閉性を担保します。コントロールシステムは、その時点で行うべき点検作業などの必要な情報を教えてくれます。



高効率の乾燥システム  
効果的なデュアルアクション乾燥システムが操作を簡単にしました。



高い目視性  
ガラスドアにより洗浄や消毒の過程であっても確認を容易に行うことができます



100%超音波洗浄  
15枚のDINバスケットを処理可能(4槽または5槽タイプの2槽目のモジュールとして)



アクセスとクリーニングが簡単  
衛生的なローラードライブ搬送システムは、アクセスとメンテナンスを容易にしました。

片側からのサービスアクセス  
人間工学的なアクセスにより、洗剤ボ  
トルの取り扱いを含む保守点検が容易  
にできます。

簡単な操作  
先進的な制御システムはタッチパネル  
により簡単に操作ができます。

自動プログラム選択。Getinge CM  
320では、多くの洗浄プログラムか  
ら選択できます。洗浄ラックに応じ  
て自動的に最適なプログラムを制  
御システムが選択します。



高い処理能力  
チャンバーの容量は、各バッチ最大  
DINバスケット15枚です。

自然排水  
自然排水が可能な配管システムにより  
残留水を排水します。

写真は右側サービスアクセスタイプです。

Getinge CM 320は  
国際規格に準拠しています。



# 簡単でスムーズな操作

Getinge CM 320シリーズは、衛生面での厳しい要求を満たすだけではありません。スピーディな処理で器材などの稼働率を高め、中央材料部門の総合的なパフォーマンス向上に貢献します。

## 制御システム

Getinge CM 320は先進的で使いやすい制御システムを搭載しています。自動的にスキャナでバーコードを読み取り、適切なプロセスを選択して各ステップを自動的に行います。

## T-DOCとの接続

Getinge CM 320は、物品を追跡して記録するソフトウェアベースの品質保証システムGetinge T-DOCに接続することができます。

T-DOCは、接続する機器のすべてのプロセス情報を保存することができます。また、グラフや対数を使って、プロセスを分析することを可能にします。

## 搬入搬出が簡単

洗浄ラック搬送のためのトロリーは装置の搬入・搬出サイドに「ドック&ロック」ができるため、対象物を迅速、スムーズに扱うことができます。

## 高い処理能力

最大15枚のDIN/バスケットを収納できる広いチャンバーと短いプロセス時間により、高い処理能力を有します。

## 高い柔軟性

Getingeシリーズの多くのアクセサリに対応しているため、Getinge CM 320は多くのご要望に応えられます。

Getinge 8668および88T用のトロリー、洗浄ラック、アクセサリを共有することもできます。



### 記録と追跡システム

Getinge CM 320は、GetingeのT-DOCトータルドキュメンテーションシステムと合わせてお使いいただくことができます。このシステムは、すべてのアイテム、バッチおよびプロセスの追跡を可能性にします。



### 自動プログラム選択

Getinge CM 320制御システムは、洗浄ラックのバーコードを読み取り、自動的に適切なプロセスを設定して起動させます。



CM 320シリーズとGetinge 88ターボの組み合わせ 汚染・洗浄エリア



CM 320シリーズとGetinge 88ターボの組み合わせ 清潔・組立包装エリア



2台のCM 320シリーズと横方向へ動く搬送システムを組み合わせることで、ローディングが簡単になります。汚染・洗浄エリア



2台のCM 320シリーズと横方向へ動く搬送システムを組み合わせることで、アンローディングが簡単になります。清潔・組立包装エリア



高い処理能力  
広いチャンバーによりDINバスケット最大15枚まで同時に処理することができます。




ドッキングとロックシステム  
搬送トrolleyから洗浄ラックを送るための安全で快適なドッキングとロックシステム。人間工学に基づいた容易なアンローディングが可能です。

# 柔軟性を備え、 - 長期的な利用を

## モジュール式による柔軟性

モジュール式のため、性能や処理量のご要望に応じて、2-5槽のチャンバー数で設計することができます。さらに、設置後でも必要に応じて追加のモジュールを取付けることができるため、新しい機器を購入する必要がありません。

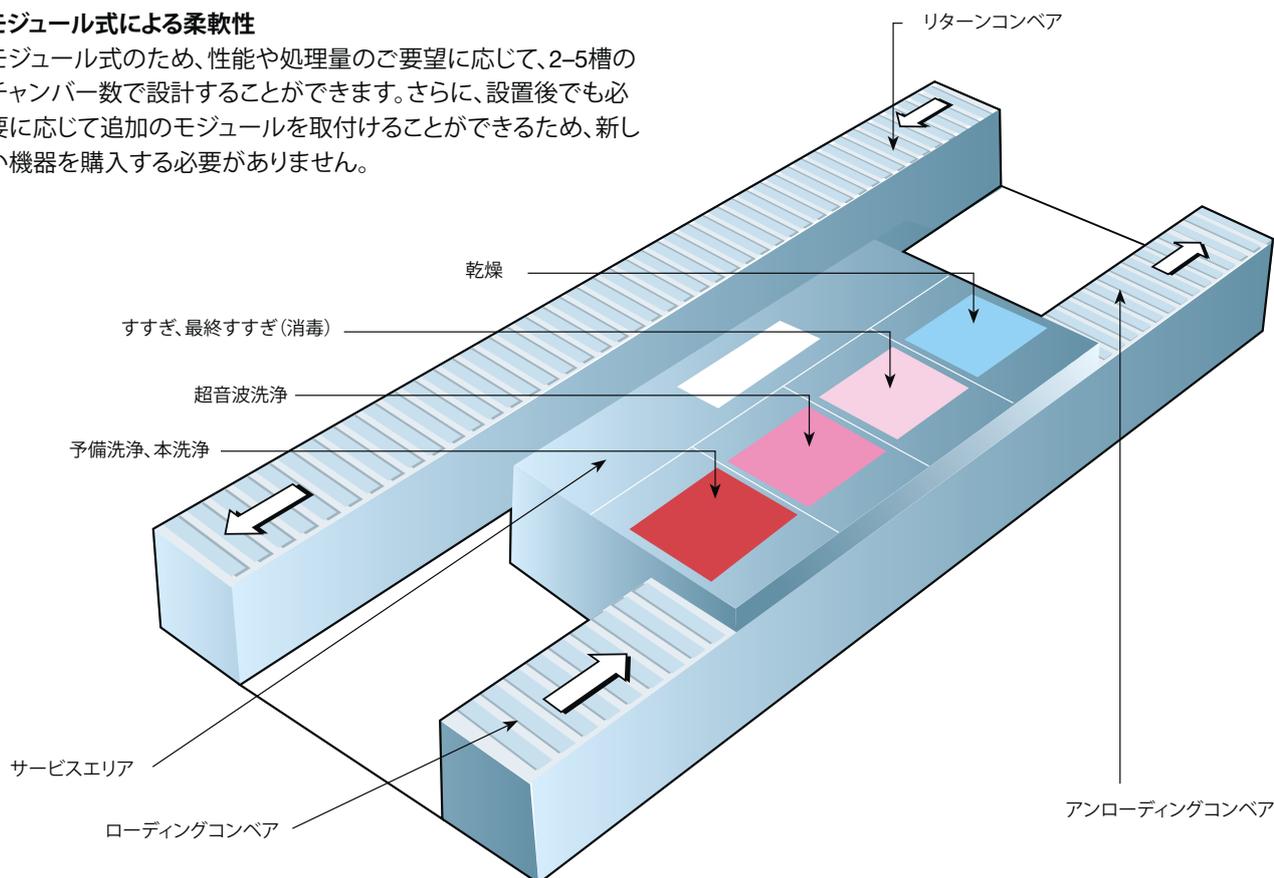

ソリューション/チャンバー	第1チャンバー	第2チャンバー	第3チャンバー	第4チャンバー	第5チャンバー
2槽式	予備洗浄/本洗浄/ 最終すすぎ(消毒)	乾燥	-	-	-
3槽式	予備洗浄/本洗浄	最終すすぎ(消毒)	乾燥	-	-
4槽式	予備洗浄/本洗浄	最終すすぎ(消毒)	乾燥	乾燥	-
4槽式超音波機能つき	予備洗浄/本洗浄	超音波洗浄	最終すすぎ (消毒)	乾燥	-
4槽式	予備すすぎ	本洗浄	最終すすぎ (消毒)	乾燥	-
5槽式	予備すすぎ	本洗浄	最終すすぎ(消毒)	乾燥	乾燥
5槽式超音波機能つき	予備すすぎ	超音波洗浄	本洗浄	最終すすぎ(消毒)	乾燥

このパンフレットに記載されている一部の機能はオプションです。CM 320シリーズマルチチャンバーウォッシャーディスインフェクターの詳細仕様に関しては、当社営業所までお問い合わせください。

# あらゆるニーズ に対応可能なアクセサリ

Getingeは様々なアクセサリや付属品を提供しております。お客様のニーズに応じてGetinge CM 320をカスタマイズすることが可能です。別途アクセサリカタログをご参照ください。

これらアクセサリ・付属品の多くはGetinge 8668、および88Tと互換性があります。



MIS洗浄ラック  
容量：6-7セット、管腔器材用接続ポート最大96か所接続



OP洗浄ラック、5段  
容量：DINバスケット15枚(480x250x50/70 mm)



コンテナ用洗浄ラック



チューブ/麻酔器材用洗浄ラック



Getingeは、手術室、集中治療室、滅菌部門、介護施設、ライフサイエンス関連企業ならびに公共施設向けに革新的ソリューションを提供するグローバルプロバイダーです。豊富な経験と、医師、看護師、技師、医療関係者との緊密なパートナーシップによって、Getingeは、今日そして未来の人々の毎日の生活を改善してまいります。

## ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

サージカルワークフローズ事業部

〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲23F

TEL: 03-5463-8313 FAX: 03-5463-6856

第一種医療機器製造販売業許可番号 13B1X00176

[www.getinge.com](http://www.getinge.com)

販売名: Getinge CM320シリーズ 一般的名称: 器具除染用洗浄器 製造販売届出番号: 13B1X00176IC0010
---

Getinge CM 320シリーズ 2017.07.1000P (Original 08/15)

※ 仕様は予告なく変更することがあります